


**PRECI-HORIX STANDARD**  
**# 1701** **SATZ**  
 2 Kunststoffstege  
 6 gelbe Reiter  
 6 Verarbeitungsreiter  
 1 Eindrückstift



**PRECI-HORIX PLASTICWAX**  
**# 1731** **SATZ**  
 2 PLASTICWAX-Stege  
 6 gelbe Reiter  
 6 Verarbeitungsreiter  
 1 Eindrückstift

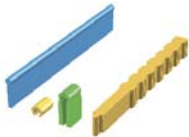

**PRECI-HORIX COMBI**  
**# 1741** **SATZ**  
 1 Kunststoffsteg  
 2 gelbe Reiter  
 2 Verarbeitungsreiter  
 2 INOX-Gehäuse  
 1 Eindrückstift




**PRECI-HORIX-REITER**  
 Normale Retention:  
**# 1802 gelb** **6 St.**  
**# 1802B gelb** **50 St.**  
 Reduzierte Retention:  
**# 1805 weiß** **6 St.**  
**# 1805B weiß** **50 St.**  
 Starke Retention:  
**# 1806 rot** **6 St.**  
**# 1806B rot** **50 St.**  
 Kombinationspackung:  
**# 1807** **2 g + 2 r + 2 w**  
**# 1807B** **25 g + 15 r + 10 w**



**PRECI-HORIX-METALLGEHÄUSE**  
 Ultradünnes INOX-Gehäuse mit goldgelber Titan-Nitrat-Schicht für den passgenauen Sitz der Reiter in der Prothese.  
**# 1706** **6 St.**  
**# 1706B** **50 St.**



**PRECI-HORIX-KUNSTSTOFFPROFIL**  
 Profilsteg aus restlos verbrennbarem Kunststoff. Gießen Sie in einer harten Legierung.  
 Länge: 50 mm - Höhe: 4 mm - ø 1,8 mm  
**# 1704** **6 St.**  
**# 1704B** **50 St.**

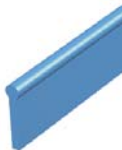

**PRECI-HORIX PLASTICWAX-PROFIL**  
 Ideal zur Verarbeitung mit schnell aufheizbaren Einbettmassen. Gießen Sie in einer harten Legierung.  
 Länge: 50 mm - Höhe: 8,25 mm - ø 1,8 mm  
**# 1734** **6 St.**  
**# 1734B** **50 St.**

CEKA AXIAL  
 PRECI-CLIX AXIAL  
 PRECI-CLIX RADIKULÄR  
 PRECI-BALL

CEKA EXTRAKORONAL  
 PRECI-VERTIX  
 PRECI-CLIX EC  
 PRECI-SAGIX  
 PRECI-52

PRECI-BAR  
**PRECI-HORIX**  
 PRECI-CLIP

PRECI-PROFILE  
 PRECI-POST  
 CEKA SOL  
 CEKA SITE  
 CEKA BOND  
 3C-BOND  
 PERMA-RET  
 PRECI-SEP  
 PLASTICWAX  
 EXPANDO  
 CEKA Multi

**01.**  
 AXIALE  
 ATTACHMENTS

**02.**  
 EXTRAKORONALE  
 ATTACHMENTS

**03.**  
 PROFIL  
 ATTACHMENTS

SPEZIALITÄTEN

**03.**  
 PROFIL  
 ATTACHMENTS

**PRECI-HORIX®**  
 DEUTSCH

[WWW.CKPL.EU](http://WWW.CKPL.EU)



**CEKA PRECI-LINE APP**



Prospekt Nr. 273.D-ed.C  
 © Copyright ALPHADENT NV 9/2014 · BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk  
**ALPHADENT NV** · Mannebeekstraat 33 8790 Waregem, Belgium  
 T+32 56 629 531 · E info@ckpl.eu

**CEKA**  
 ATTACHMENTS  
**PRECI-LINE**

**CEKA**  
 ATTACHMENTS  
**PRECI-LINE**

# PRECI-HORIX

EINFACH UND VORTEILHAFT



Das PRECI-HORIX-Stegreitersystem, entwickelt von Helmut Hader, ist einfach zu verarbeiten und von dauerhafter Präzision. Es ist die wohl weltweit am häufigsten verwendete Stegverankerung. Zahntechniker schätzen PRECI-HORIX schon seit über 40 Jahren aufgrund der sicheren Retention der Kunststoffreiter, der unkomplizierten Nachsorge und des Tragekomforts für den Patienten.



- ✓ Schnell und einfach ersetzbarer Reiter in drei verschiedenen Retentionswerten
- ✓ Freie Legierungswahl
- ✓ Hervorragend geeignet zur Verwendung auf Implantaten
- ✓ Direkte Abstützung mit Rotation
- ✓ Das hörbare Einrasten des Reiters signalisiert dem Patienten die sichere Verankerung



## PRECI-HORIX-GEHÄUSE EINFACHES ANBRINGEN DER REITER

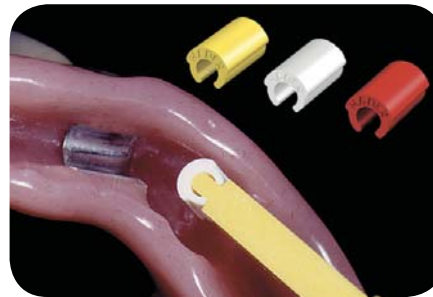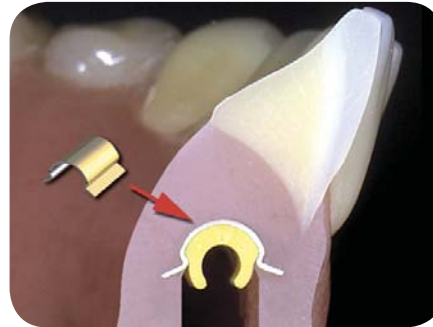

Empfohlene Verarbeitung: Polymerisieren Sie das Metallgehäuse für den passgenauen Sitz des Reiters in den Kunststoff ein. Setzen Sie dann den PRECI-HORIX-Kunststoffreiter in einem der drei Retentionswerte in das Metallgehäuse.

Weiß: reduzierte Retention  
Gelb: normale Retention  
Rot: starke Retention



Das Profil von 1,8 mm ist auch mit den PRECI-CLIP-Reitern kompatibel.

## EINFACHE VERARBEITUNG

